

СОГЛАСОВАНО

И.о Генерального директора

ФГУ «Брянский ЦСМ»

С.Г. МОРОЗОВ

«25» сентября 2009 г.

МЕНЗУРКИ 50, 100, 250, 500, 1000 см <sup>3</sup>	Внесены в Государственный реестр средств измерений Регистрационный № <u>26770-04</u> Взамен № _____
--	--

Выпускаются по ГОСТ 1770-74 «Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия».

### НАЗНАЧЕНИЕ

Мензурки предназначены для измерения объемов жидкостей при проведении лабораторных исследований.

### ОПИСАНИЕ

Мензурка представляет собой стеклянный конический стакан с оплавленным краем и носиком для слива жидкости.

На ее поверхности нанесена градуировочная шкала.

### ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование характеристики	М Е Н З У Р К И				
	Вместимость, см <sup>3</sup>				
	50	100	250	500	1000
Допустимая погрешность, см <sup>3</sup>	± 2,50	± 5,00	± 5,00	± 12,50	± 25,00
Цена наименьшего деления, см <sup>3</sup>	5	10	25	25	50
Объем, соответствующий нижней отметке, см <sup>3</sup> , не более	5	10	25	50	100
Высота мензурки, мм	80 ± 5	100 ± 5	120 ± 5	150 ± 10	170 ± 10
Длина от основания мензурки до конечной отметки, мм, не менее	50	65	80	100	130
Диаметр основания, мм	32 ± 2	38 ± 2	55 ± 2	70 ± 3	90 ± 3
Диаметр верхней части мензурки, мм	45 ± 2	56 ± 2	75 ± 2	95 ± 3	122 ± 3

## ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносят на мензурку методом вжигания и на этикетку методом печати.

## КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят:

Наименование	Вместимость, см <sup>3</sup>	Количество, шт.
Мензурка	50	15
-"	100	12
-"	250	8
-"	500	5
-"	1000	3
Этикетка	МИДП.725227.001 ЭТ	1
Коробка	МИДП.321312.058	1
Методика поверки	МИДП.725227.001 МП	1

## ПОВЕРКА

Поверку проводят по методике поверки МИДП.725227.001 МП, согласованной ФГУ "Брянский ЦСМ" в феврале 2009 г.

При проведении поверки применяют следующие средства измерений:

- линейка 0-300 мм ГОСТ 427-75;
- штангенциркуль ШЦ-П-250-0,1 ГОСТ 166-89;
- лупа измерительная ЛИЗ-10<sup>x</sup> ГОСТ 25706-83;
- весы высокого класса точности ГОСТ 24104-2001;
- термометр 0-55<sup>0</sup>С, ЦД-0,1<sup>0</sup>С ТУ 25-2021.003-88.

Поверка – Производится первичная поверка при выпуске из производства.

## НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ


ГОСТ 1770-74 "Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия".

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тип – Мензурки утвержден с техническими и метрологическими характеристиками, приведенными в настоящем описании типа, метрологически обеспечен при выпуске из производства и в эксплуатации согласно государственной поверочной схеме.

Изготовитель: ООО "МиниМедПром", 242600, г. Дятьково Брянской обл., ул. Ленина, д. 182, корп. 5, тел. (48333) 3-44-05; факс (48333) 3-27-02.

Директор ООО "МиниМедПром"

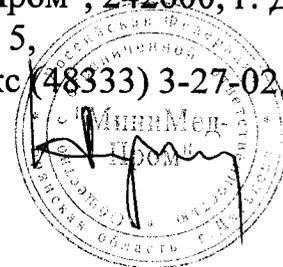

Ю.В.АХРАМЕЕВ